



ID-Partial RhD Typing Set

Die kompakte Lösung für Ihre D-Typisierungsuntersuchungen

Zur Bestimmung von partiellem RhD

Das **ID-Partial RhD Typing Set** enthält 6 monoklonale Anti-D Reagenzien, die bei der weiteren Charakterisierung des RhD-Antigens nach einem Routinetest helfen können sowie 12 ID-Karten für insgesamt 12 Tests.


Die Reagenzien helfen bei der Differenzierung zwischen den Kategorien DII, DIV, DV, DVI, DVII, DFR, DBT und R_0^{Har} .



ID-Partial RhD Typing Set



Testdurchführung

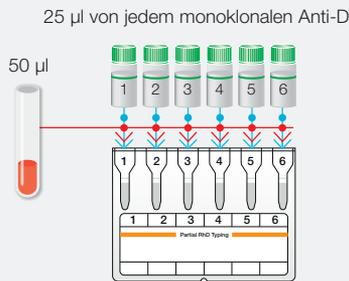


- Pipettieren Sie 50 µl einer 0,8 % Erythrozytensuspension in jede Mikrokammer (mit ID-Diluent 2 vorbereitet)
- Geben Sie 25 µl jedes Anti-D Serums (1-6) in die entsprechende Mikrokammer hinzu

Inkubation



- Inkubieren Sie die ID-Karte für 15 Minuten bei 37°C
- Zentrifugieren Sie die ID-Karte 10 Minuten

Zentrifugation

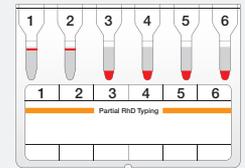

- Lesen Sie die Resultate ab

Interpretationstabelle

Cell line	Anti-D	DII	DIII	DIVa	DIVb	DV	DVI	DVII	DFR	DBT	DHAR
LHM76/55 (IgG)	1	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-
LHM77/64 (IgG)	2	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-
LHM70/45 (IgG)	3	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
LHM59/19 (IgG)	4	+	+	+	+	+	-	+ -*	-	+	-
LHM169/80 (IgG)	5	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-
LDM1 (IgM)	6	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+

* Eine schwächere Reaktion kann mit diesem Antikörper, im Vergleich mit den anderen 5 Seren, beobachtet werden.

Wichtigste Produktmerkmale

Schnell	▪ Deutliches Ergebnis innerhalb von 25 Minuten
Einfach	▪ Nur 2 Pipettierschritte ▪ Kein Waschen
Spezifisch	▪ Differenzierung zwischen den wichtigsten Kategorien von Partiellen D-Typen DII, DIV, DV, DVI, DVII, DFR, DBT, R ₀ ^{Har} und bekannten, schwachen D-Phänotypen
Anzahl monoklonaler Antikörper (Test-Fläschchen)	▪ 6 in einer ID-Karte verwendet, für eine Bestimmung - ID-Karten zur Verfügung gestellt

Bestellinformationen

Katalog Nr. Beschreibung

ID-Partial RhD Typing Set

001451 Test Kit ID-Partial RhD Typing Set (Id-n°: 46170), 12 Teste
ID-Karten, 1 x 12
ID-Anti-D 1-6, 6 x 0.4 ml

Zelllinien: LHM76/55, LHM77/64, LHM70/45, LHM59/19, LHM169/80, LDM1

Zusätzlich benötigte ID-Karten

Coombs Anti-IgG

004024 6 x AHG (Anti-IgG) (Id-n°: 50540) Kaninchen 288 Teste, 4 x 12

BIO-RAD ist eine Marke von Bio-Rad Laboratories, Inc.

Erfahren Sie mehr auf www.bio-rad.com/immunohematology



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Bio-Rad-Niederlassung in Ihrer Nähe oder besuchen Sie unsere Website unter www.bio-rad.com/diagnostics

Clinical
Diagnostics Group

Website www.bio-rad.com/diagnostics Australia +61 (2) 9914 2800 Austria +43 (0) 1 877 89 01 9 Belgium +32 (0) 3 710 53 00 Brazil +55 11 3065 7550 Canada +1 514 334 4372 China +86 21 6169 8500 Czech Republic +420 241 431 660 Denmark +45 44 52 10 00 Finland +358 9 804 22 00 France +33 (0) 1 47 95 60 00 Germany +49 (0) 89 31884 393 Greece +30 210 7774396 Hong Kong +85 2 2789 3300 Hungary +36 1 459 6190 India +91 124 4029300 Israel +972 03 963 6025 Italy +39 024 94 86 600 Japan +81 3 6361 7070 Korea +82 080 007 7373 Mexico +52 (55) 5488 7670 The Netherlands +31 (0)318 540 666 New Zealand +64 (9)415 2280 Norway +47 23 38 41 30 Poland +48 22 331 99 99 Portugal +351 21 47 27 700 Russia +7 495 721 1404 Singapore +65 6415 3170 South Africa +27 11 442 8508 Spain +34 91 490 6580 Sweden +46 844 98053 Switzerland +41 (0) 61 717 9555 Taiwan +886 (2) 2578-7189 Thailand (662) 651 8311 United Kingdom +44 (0)1923 471301