



## ID-Partial RhD Typing Set

La solution compacte pour l'investigation de vos types D

### Pour la détermination de RhD partiel

Le kit **ID-Partial RhD Typing Set** est composé de 6 réactifs anti-D monoclonaux aidant à la caractérisation des antigènes RhD après un test de routine ainsi que de 12 cartes-ID pour un total de 12 tests.


Les réactifs aident à différencier les catégories DII, DIV, DV, DVI, DVII, DFR, DBT et R<sub>0</sub><sup>Har</sup>.



ID-Partial RhD Typing Set



## Technique

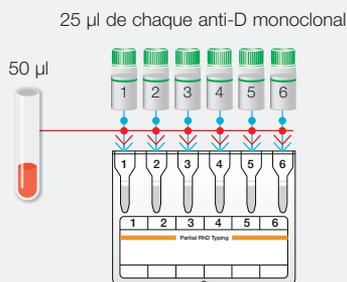


- Pipettez 50 µl d'une suspension de globules rouges 0,8 % dans chaque puits (préparée avec ID-Diluent 2)
- Ajoutez 25 µl de chaque anti-D (1-6) dans le puits approprié

### Incubation



- Incubez la carte-ID pendant 15 minutes à 37 °C
- Centrifugez la carte-ID pendant 10 minutes

### Centrifugation

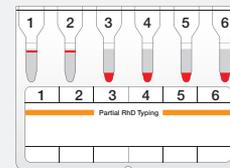

- Lisez les résultats

## Table d'interprétation

Lignées cellulaires	Anti-D	DII	DIII	DIVa	DIVb	DV	DVI	DVII	DFR	DBT	DHAR
LHM76/55 (IgG)	1	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-
LHM77/64 (IgG)	2	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-
LHM70/45 (IgG)	3	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
LHM59/19 (IgG)	4	+	+	+	+	+	-	+ -*	-	+	-
LHM169/80 (IgG)	5	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-
LDM1 (IgM)	6	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+

\* On peut observer une réaction plus faible avec cet anticorps, en comparaison avec les 5 autres sérums.

## Fonctions principales

<b>Rapide</b>	▪ Résultat en 25 minutes
<b>Simple</b>	▪ Seulement 2 étapes de pipetage ▪ Pas de lavage
<b>Spécifique</b>	▪ Différenciation entre les principales catégories de D partiels de types DII, DIV, DV, DVI, DVII, DFR, DBT, R <sub>0</sub> <sup>Har</sup> et les D faibles les plus communs
<b>Nombre d'anticorps monoclonaux</b> (flacons pour tests)	▪ 6 utilisés dans une carte-ID pour une seule détermination - cartes-ID fournies

### Pour commander

Référence Désignation  
**ID-Partial RhD Typing Set**  
 001451 Kit de test ID-Partial RhD Typing Set (Id-n°: 46170), 12 tests  
 Cartes-ID, 1 x 12  
 ID-Anti-D 1-6, 6 x 0,4 ml

Lignées cellulaires : LHM76/55, LHM77/64, LHM70/45, LHM59/19, LHM169/80, LDM1

### Cartes-ID nécessaires non incluses

**Coombs Anti-IgG**  
 004024 6 x AHG (Anti-IgG) (Id-n°: 50540) lapin 288 tests, 4 x 12

BIO-RAD est une marque déposée de Bio-Rad Laboratories, Inc.

Pour plus d'information :  
[www.bio-rad.com/immunohematology](http://www.bio-rad.com/immunohematology)



**Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou la notice d'utilisation.**

**Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant local Bio-Rad ou visiter notre site : [www.bio-rad.com/diagnostics](http://www.bio-rad.com/diagnostics)**



**Bio-Rad Laboratories, Inc.**

Clinical  
 Diagnostics Group

Website [www.bio-rad.com/diagnostics](http://www.bio-rad.com/diagnostics) Australia +61 (2) 9914 2800 Austria +43 (0) 1 877 89 01 9 Belgium +32 (0) 3 710 53 00 Brazil +55 11 3065 7550 Canada +1 514 334 4372  
 China +86 21 6169 8500 Czech Republic +420 241 431 660 Denmark +45 44 52 10 00 Finland +358 9 804 22 00 France +33 (0) 1 47 95 60 00 Germany +49 (0) 89 31884 393  
 Greece +30 210 7774396 Hong Kong +85 2 2789 3300 Hungary +36 1 459 6190 India +91 124 4029300 Israel +972 03 963 6025 Italy +39 024 94 86 600  
 Japan +81 3 6361 7070 Korea +82 080 007 7373 Mexico +52 (55) 5488 7670 The Netherlands +31 (0)318 540 666 New Zealand +64 (9)415 2280 Norway +47 23 38 41 30  
 Poland +48 22 331 99 99 Portugal +351 21 47 27 700 Russia +7 495 721 1404 Singapore +65 6415 3170 South Africa +27 11 442 8508 Spain +34 91 490 6580  
 Sweden +46 844 98053 Switzerland +41 (0) 61 717 9555 Taiwan +886 (2) 2578-7189 Thailand (662) 651 8311 United Kingdom +44 (0)1923 471301